

DUCAGEL Z₁

An exclusive technology,

- Exclusive Ugin'dentaire latest generation **regulation card**.
- **New resistance** ensuring heating homogeneity, eliminating overheating risks.
- Two possible compounding procedures: **continuous or intermittent**.
- **10 free programmes** (user-defined fusion and control temperatures).

still greater safety,

- Motor **electronic protection**.
- Double lid gives protection **against burns**.
- **Inductive lid opening detector** stops mixing.
- Mixing rotor spindle higher than vat gives **safety in filling**.

even more robust,

- new mixing rotor with strengthened spindle.

and a new design

- **New ergonomic spigot design** gives better manipulation with **anti-grip handle**.

Technical characteristics

Power supply:	230 V 50/60 Hz
Power:	850 W
Maximum vat temperature:	99 °C

Dimensions

Height (lid closed):	510 mm
Height (lid open):	820 mm
Width:	325 mm
Depth:	425 mm

Vat dimensions

Internal diameter:	240 mm
Height:	220 mm
Capacity:	6 kg




New mixing rotor



Double lid



Anti-grip handle

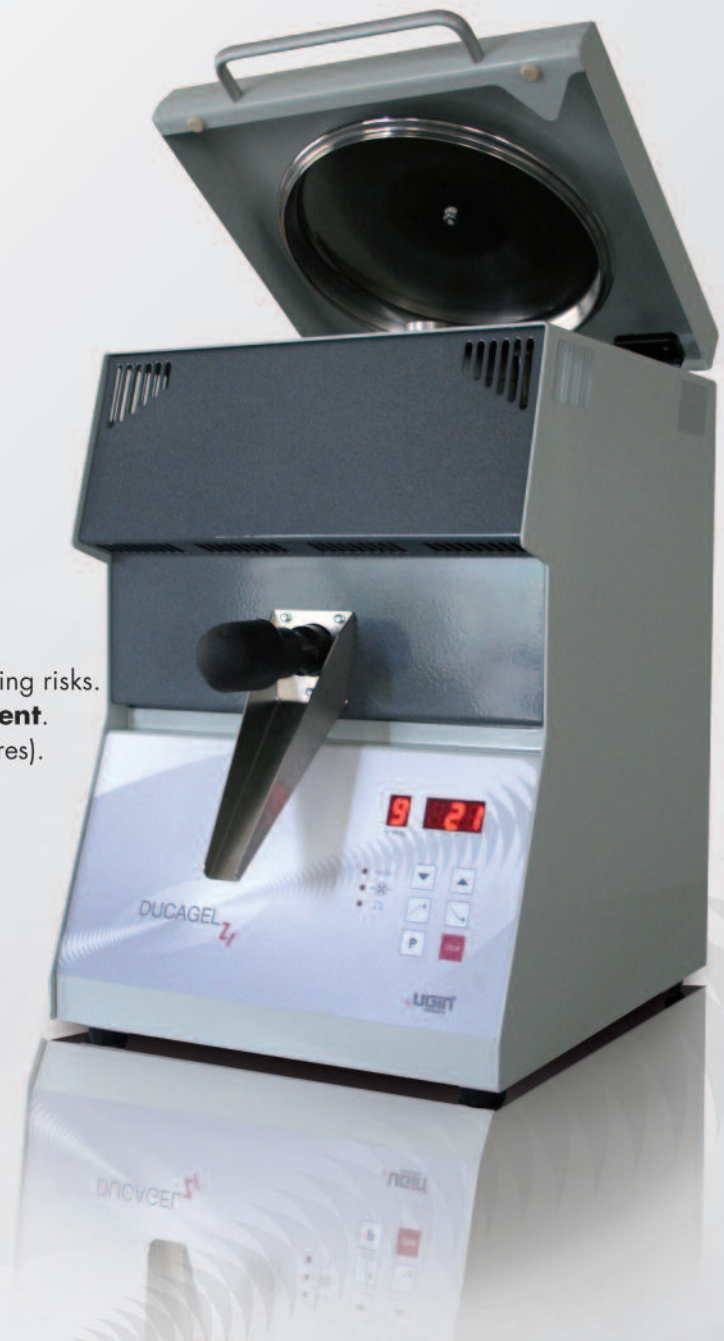

Ref. GEL01DCGZ001

25, rue de la Tuilerie 38170 Seyssinet-Pariset, France
Fax national : (33) 4 76 84 46 45 - Fax international : (33) 4 76 84 46 46
E-mail : export@ugin-dentaire.fr / http://www.ugin-dentaire.fr

UGIN'
dentaire

DUCAGEL Z1

Une technologie exclusive,

- **Carte de régulation** dernière génération, exclusivité Ugin'dentaire.
- Une **nouvelle résistance** qui assure une homogénéité de la chauffe, supprimant ainsi les risques de surchauffe.
- 2 types de malaxages possibles : **permanent ou intermittent**.
- 10 **programmes libres** (les températures de fusion et de régulation peuvent être définies par l'utilisateur).

toujours plus de sécurité,

- **Protection électronique** du moteur.
- Protection **contre les brûlures** grâce à un double capot.
- **Détection inductive** de l'ouverture du capot qui stoppe le brassage.
- **Sécurité de remplissage** grâce à l'axe du couteau de brassage qui est plus haut que la cuve.

encore plus de robustesse,

- Nouveau couteau de malaxage dont l'axe est renforcé.

et un nouveau design

- **Nouvelle ergonomie** du robinet pour une meilleure prise en main (**poignée anti-grip**).

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation : 230 V 50/60 Hz
Puissance : 850 W
Temp. maxi dans la cuve : 99 °C

Dimensions

Hauteur (couvercle fermé) : 510 mm
Hauteur (couvercle ouvert) : 820 mm
Largeur : 325 mm
Profondeur : 425 mm

Dimensions de la cuve

Diamètre intérieur : 240 mm
Hauteur : 220 mm
Capacité : 6 kg



Nouveau couteau de malaxage



Double capot



Poignée anti-grip



Ref. GEL01DCGZ001

25, rue de la Tuilerie 38170 Seyssinet-Pariset, France
Tel national : (33) 4 76 84 45 45 - Tel international : (33) 4 76 84 45 43
E-mail : info@ugin-dentaire.fr / http://www.ugindentaire.fr

 UGIN
dentaire